

2本溶解する場合の操作方法(薬液が5mLで付属のシリンジを使用する場合)

- ① 基本溶解操作の1～9に従い2本分溶解します。
- ② 1本目のシリンジ(A)の薬液を抜き取り、エア抜きをします。
- ③ 2本目のバイアル(B)からシリンジをはずします。
- ④ 1本目のバイアル(A)からシリンジをはずし、2本目のバイアル(B)に接続し、残りの薬液を抜き取り、エア抜きをします。
- ⑤ 翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。

薬液が5mL以上で大きなシリンジが必要な場合は、医療機関にご相談ください。

廃棄の手順

- ① 誤刺防止機能である、翼付針のストッパーを両側をつまんでロックをはずします。そのまま引いて針をプロテクター内に収納します。
- ② 医療機関の指示に従って分別します。

パッケージについて

- 2つ連結したパッケージは1つずつに分けられます。



日本パッケージングコンテスト(第39回)において「2017 医薬品・医療用具包装部門賞」を受賞しました



ミシン目入りで折りたたみやすく廃棄しやすい構造です



製造販売元 [文献請求先及び問い合わせ先]
 バイエル薬品株式会社
 大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
<https://pharma.bayer.jp>
 [コンタクトセンター]
 0120-106-398
 <受付時間> 9:00～17:30(土日祝日・当社休日を除く)

2025年12月改訂
 資料番号 KOV262101

コバルトリー® 静注用の溶解操作方法

溶解操作で使用するもの



その他(付属物)



溶解操作や注射手技については、医療機関の指導に従って、行ってください。


溶解操作方法の手順

コバールトリイ[®] 静注用の基本溶解操作方法

1 未開封のバイアルと注射用水入シリンジが冷たい場合、冷たさがなくなるまで手で温めます。



2 バイアルのキャップをはずし、ゴム栓の部分アルコール綿で消毒します。

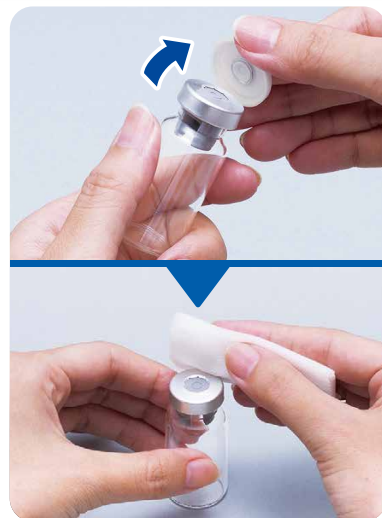

！ 消毒後、ゴム栓には直接指で触れないこと

3 バイアルアダプターの保護シートをはずし、ケースに入れたままバイアルに**しっかり**押し下げます。



4 バイアルアダプターのケースのみはずします。



！ バイアルアダプターの針の部分には直接触れないこと

5 注射用水入シリンジのゴム栓にプランジャーを接続します。



！ プランジャーの側面、先端部には触れないこと

6 注射用水入シリンジのキャップをはずします。



！ 注射用水入シリンジの先端部には触れないこと

7 バイアルアダプターに注射用水入シリンジを接続します。



！ 注射用水入シリンジは回しすぎると壊れたり、はずれくなるので、注意すること

8 プランジャーを**ゆっくり**押し下げ、注射用水をバイアル内に入れます。



！ 泡立たないように、ゆっくり押し下げること

9 バイアルを**静かに**円を描くように回し、完全に溶かします。



！ 強く振らないこと

10 バイアルを逆さにして、プランジャーを**ゆっくり**引き、注射液をシリンジに移します。注射液を抜き取ったら、シリンジはバイアルから取りはずします。



！ シリンジを置くときは平らな場所に水平に置くこと

11 翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。

